

4. Genomföra EIT-övervakning



5. Kontrollera regelbundet

- 5.1 Är kvaliteten på mätningen tillräckligt hög (ScoutView)?
- 5.2 Har tillräckligt många elektroder kontakt med huden (ScoutView)?
- 5.3 Detekteras andetaget tillräckligt väl (LuFuView)?
- 5.4 Motsvarar patientdata i ScoutView den aktuella patienten?
- 5.5 Är SensorBelt placerat på rätt anatomiska riktmärken?



Följ bruksanvisningen.
Detaljerad information finns
i användarhandboken.

Ytterligare information fås på:

telefon: + 41 (0) 81 330 09 72 Swisstom AG
e-post: info@swisstom.com Schulstrasse 1, CH-7302
eller: www.swisstom.com Landquart, Schweiz

25T100-116, Rev. 001, februari 2015, © Swisstom AG; Innehåll och foton: Swisstom AG; Konzept och design: Zweizeit Brand Development





Swisstom BB²

Kort med instruktioner i korthet



1. Bestäm SensorBelt-storlek

- 1.1 Se till att patienten uppfyller kriterierna för EIT-övervakning.
- 1.2 Mät patientens halva bröstomfång.
- 1.3 Läs av SensorBelt-storleken på måttbandets baksida.
- 1.4 Ta fram ett SensorBelt i rätt storlek.

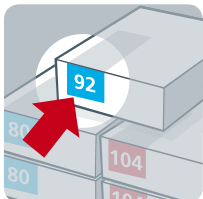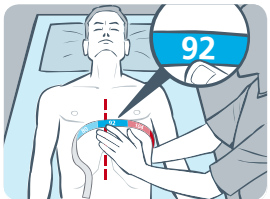

2. Förbered Swisstom BB²

- 2.1 Sätt på Swisstom BB². ScoutView visas.
- 2.2 Anslut SensorBeltConnector till BB² Monitor.
- 2.3 Ange halvt bröstomfång, längd, vikt och kön.



3. Förbered för EIT-övervakning

- 3.1 Fäst SensorBelt på patienten enligt instruktionerna som medföljer användarhandboken till SensorBelt.
- 3.2 Koppla ihop SensorBelt med SensorBelt-Connector. Lampan måste lysa grönt.
- 3.3 Är den faktiska SensorBelt-storleken på patienten samma som den rekommenderade storleken (ScoutView)?
- 3.4 Se till att placera SensorBelt på rätt anatomiska riktmärken.
- 3.5 Justera SensorBelt om för många elektroder felar.

